

# PRAKTIKUM Z FYZIKY PLAZMATU

Diagnostika plazmatu doutnavého výboje pomocí jednoduché sondy

**Zpracovali:** Radek Horňák, Lukáš Vrána

**Naměřeno:** 1. 3. 2022

## 1 Teorie

### 1.1 Elektrostatická Langmuirova sonda

Langmuirova sonda je vodič malých rozměrů zavedený do plazmatu, pomocí nějž lze měřit nejdůležitější parametry plazmatu jako elektronovou hustotu  $n_e$ , teplotu elektronů  $T_e$ , rozdělovací funkci elektronů  $f(v)$  a prostorové rozdělení potenciálu a elektrického pole. Napětí sondy  $U_S$  určujeme vzhledem k referenční elektrodě. Potenciál plazmatu v místě sondy vůči stejné referenční elektrodě označme  $V_p$ . Pokud je vůči ní plocha sondy velmi malá, můžeme sondu nazvat jednoduchou. Podle tvaru lze dále sondy dělit na válcové, kulové a rovinné. Závislost proudu protékajícího sondou  $I_S$  na napětí přiloženém na sondu  $V_S$  tvoří voltampérovou (VA) charakteristiku sondy. Napětí sondy  $U_S$  získáme pomocí vztahu

$$U_S = V_S - V_p \quad (1)$$

Pokud sonda není připojena k vnějšímu obvodu a proud elektronů i iontů na ni se ustálí, je výsledný proud nulový a sonda se ustálí na napětí  $V_{fl}$ , tedy na plovoucím potenciálu.

VA charakteristiku jednoduché sondy můžeme rozdělit na tři části. Tou první je oblast saturovaného iontového proudu označená na obr. 1 jako *A*. Sonda je záporně nabita vzhledem k potenciálu plazmatu, elektrony jsou odpuzovány a ionty naopak přitahovány. Vizualně se to projevuje temným prostorem obalujícím sondu.

Druhou část charakteristiky tvoří přechodová oblast, pro kterou lze  $U_S$  vymezit jako  $-2(V_p - V_{fl} \leq U_S \leq 0)$ . Na obr. 1 se jedná o oblast *B*. Celkový proud sondou  $I_S$  můžeme vyjádřit jako

$$I_S = I_i + I_e \quad (2)$$

kde  $I_i$  je iontový proud a  $I_e$  elektronový proud, který je dán vztahem


$$I_e = S n_e \sqrt{\frac{kT_e}{2\pi m_e}} \exp\left(\frac{-eU_S}{kT_e}\right) \quad (3)$$

kde  $S$  je povrch sondy,  $e$  elementární náboj,  $n_e$  koncentrace elektronů,  $k$  Boltzmanova konstanta a  $m_e$  hmotnost elektronu.

Oblast saturovaného elektronového proudu je na obr. 1 označená jako *C*. Sonda je vzhledem k potenciálu plazmatu na kladném napětí a přitahuje tak elektrony. U válcové sondy nejví tato oblast nasycení, nýbrž parabolicky narůstá.

## 2 Měření a výsledky


Měření provádíme na aparatuře, jejíž schéma je vidět na obr. 2. Výbojka je čerpaná rotační olejovou vývěvou. Tlak nastavujeme změnou průtoku argonu a měříme jej Piraniho

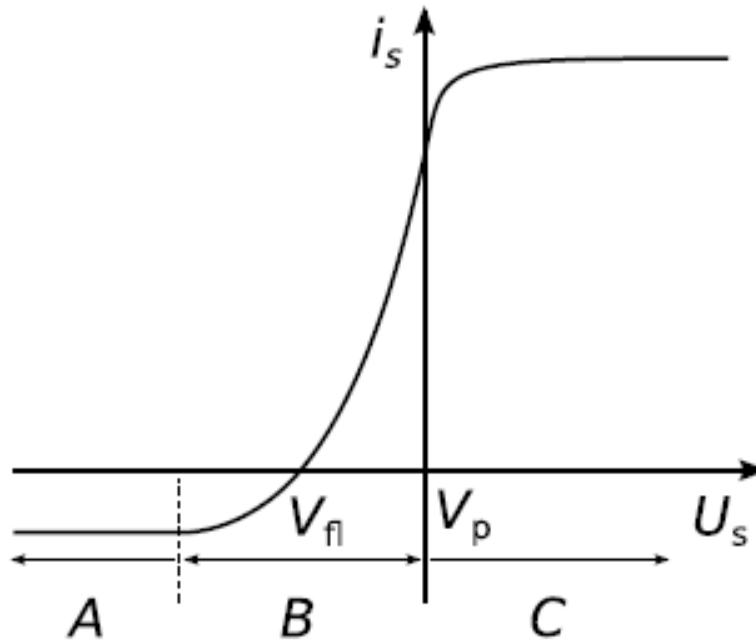

Obrázek 1: VA charakteristika jednoduché rovinné sondy.

manometrem. Do výbojky je zavedená jednoduchá válcová sonda, jejíž délku jsme odhadli na 8 mm a průměr 0,1 mm. Povrch podstavy válcové sondy je k povrchu jejího pláště  $S$  zanedbatelný, dostáváme  $S \approx 2,5$ .


Při měření vždy nejprve nalezneme plovoucí potenciál, abychom měli jistotu, že naměříme oblast nalevo i napravo od něj. Při měření se napětí přiložené na sondu  $V_s$  mění automaticky pomocí elektrického motorku, na kterém stačí zařadit rychlostní stupeň v jednom se směrů chodu. Data jsou ukládána na počítač. Při vyhodnocování jsme se museli synchronizovat.

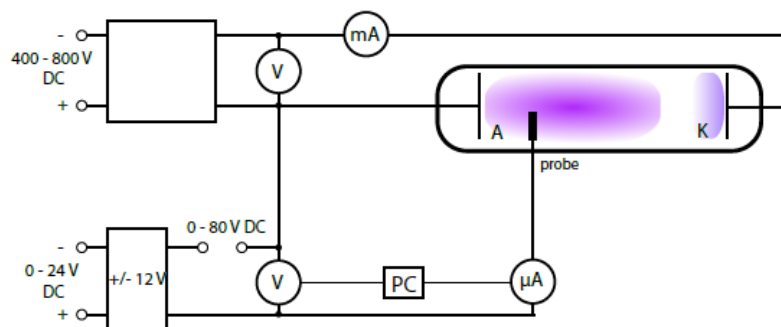

Obrázek 2: Schéma aparatury.

Provedli jsme měření za konstantního tlaku 100 Pa pro tři hodnoty výbojového proudu  $I_v$ . Výsledné VA charakteristiky jsou v grafu na obr. 3. Z nich lze určit plovoucí potenciál, který se s rostoucím výbojovým proudem zvětšuje, viz tab. ?? . Dále jsme provedli měření za konstantního výbojového proudu 40 mA pro pět hodnot tlaku. Odpovídající VA charakteristiky jsou v grafu na obr. 4. Pro tlak 200 Pa je plovoucí potenciál nejmenší, v oblasti 5–50 Pa však nevykazuje žádný trend, viz tab. ?? .

Dále je potřeba od charakteristik odečíst iontový proud, oblast kde saturuje jsme proložili křivkou. Názorné proložení pro VA charakteristku za podmínek  $p = 100\text{Pa}$  a  $I_v = 40\text{mA}$  je na

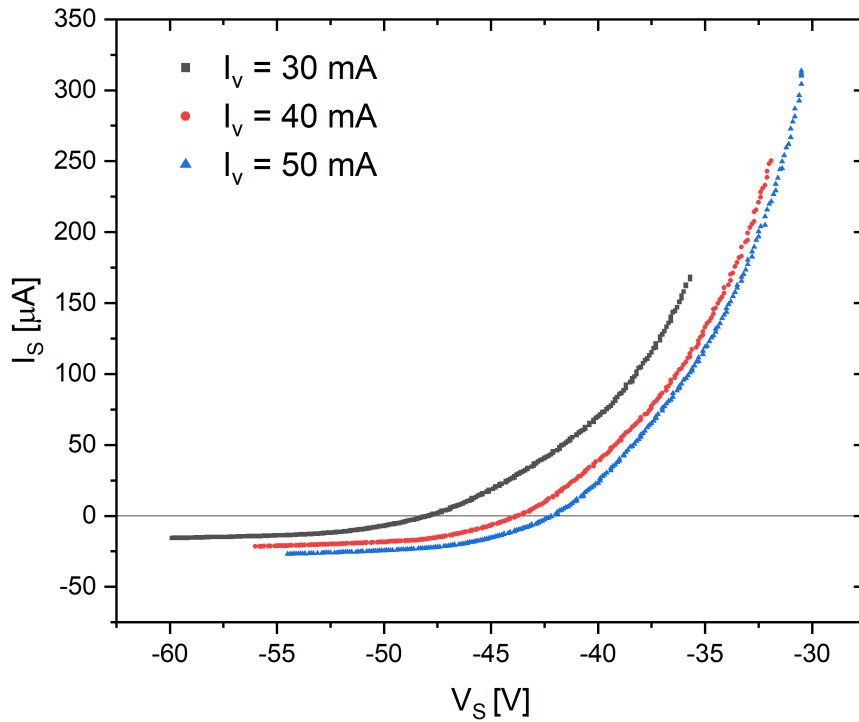


Obrázek 3: Naměřené VA charakteristiky za konstantního tlaku 100 Pa.

obr. 5. Ve zbylých případech jsme postupovali obdobně. VA charakteristiky s takto odečteným iontovým proudem jsou v grafech na obr. 6 a 7.


Potenciál plazmatu  $V_p$  přibližně určíme ze zlomu VA charakteristik jako průsečík asymptot k lineární částem závislosti. Tento postup je vidět na obrázcích 8 až 15 vlevo a výsledné  $V_p$  jsou uvedeny v tab. ???. Nyní můžeme ze vztahu 1 dopočítat  $U_S$ . Pokud následně sestrojíme závislosti  $\ln I_e = -\frac{e}{kT_e}U_S + C$  pro oblasti  $-2(V_p - V_{fl} \leq U_S \leq 0)$ , můžeme z elektronového proudu pro  $U_S = 0$  dle vztahu 3 dopočítat koncentraci elektronů. Závislosti  $\ln I_e = f(U_S)$  proložené přímkou jsou na obrázcích 8 až 15 vpravo.

druhá várka zde


### 3 Závěr

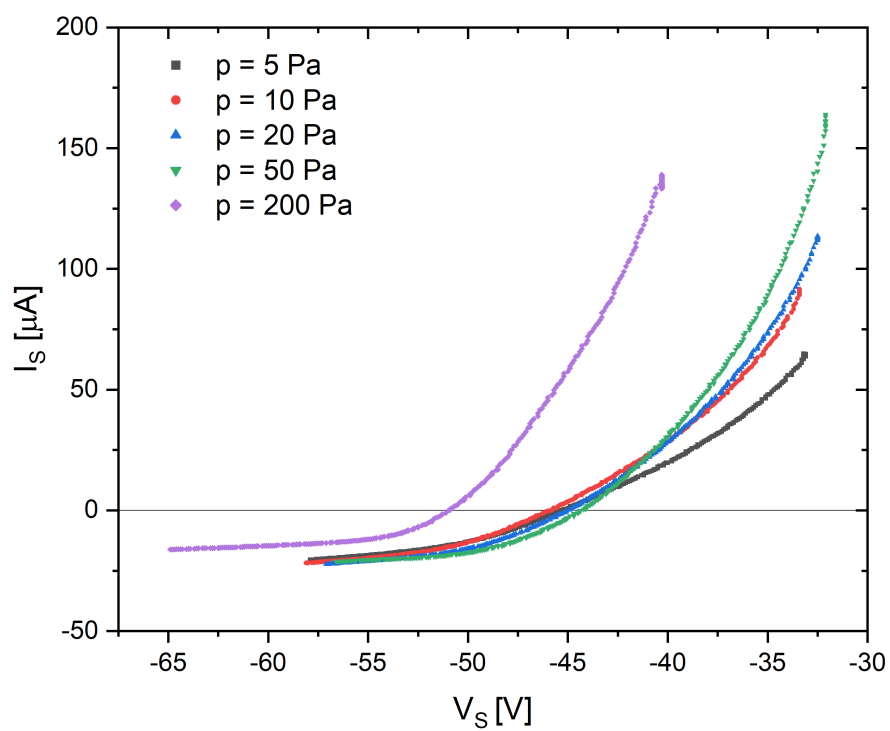


Obrázek 4: Naměřené VA charakteristiky za konstantního výbojového proudu 40 mA.

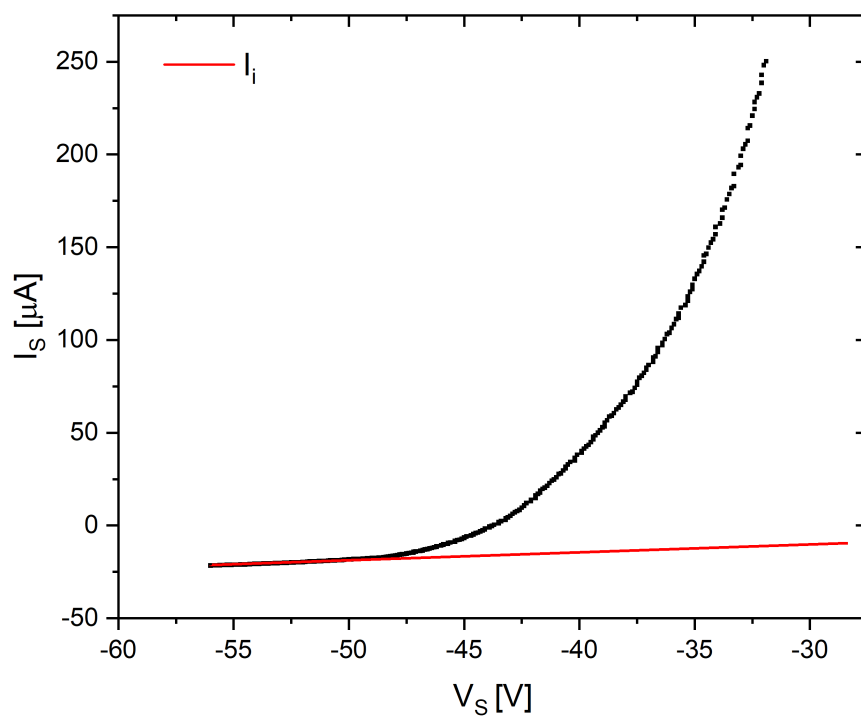


Obrázek 5: Lineární fit saturovaného iontového proudu,  $p = 100 \text{ Pa}$  a  $I_v = 40 \text{ mA}$ .

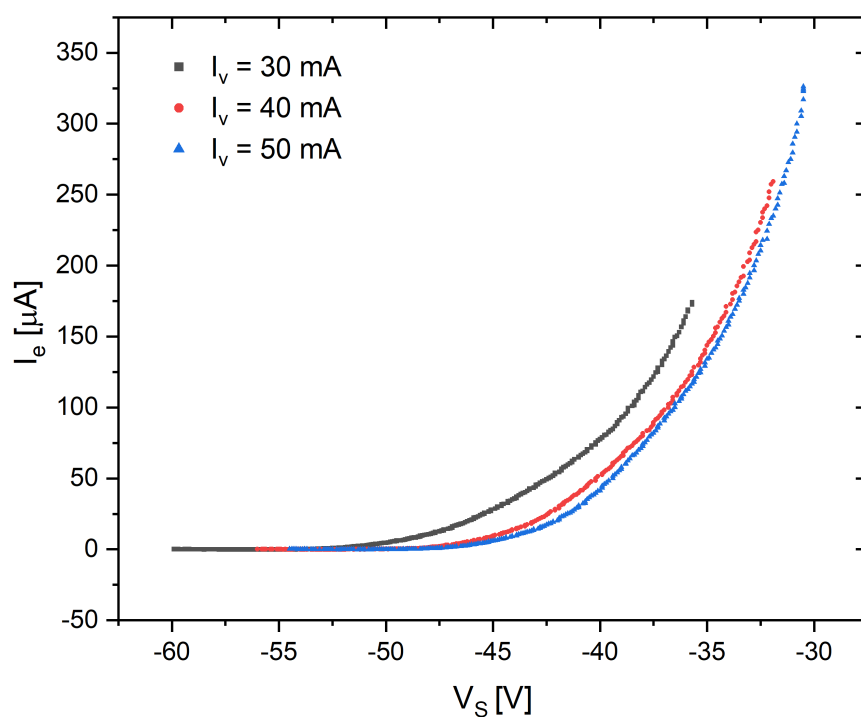


Obrázek 6: VA charakteristiky s odečteným iontovým proudem pro měření s konstantním tlakem  $p = 100 \text{ Pa}$ .

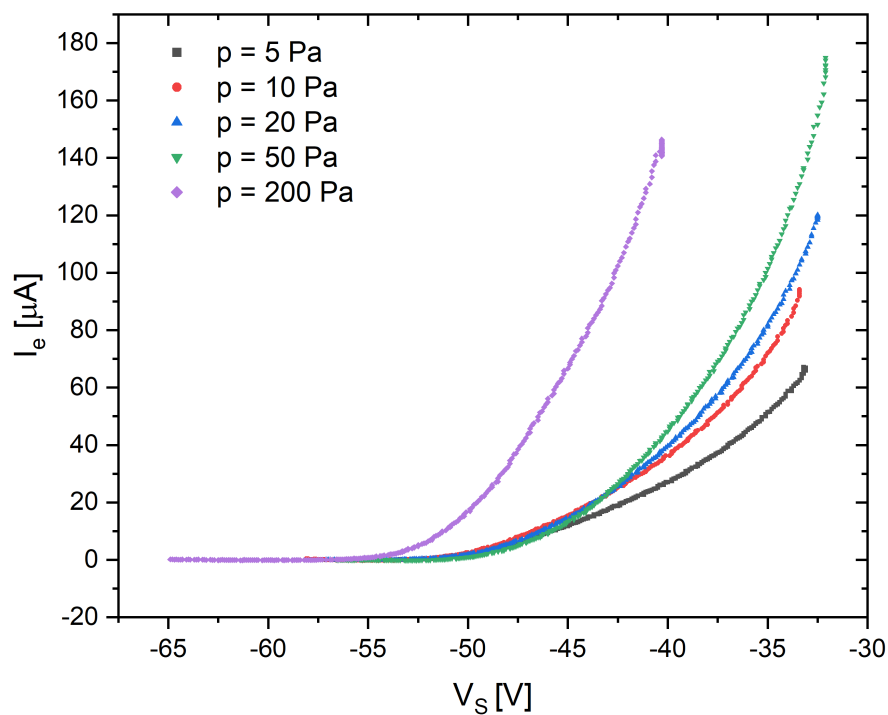


Obrázek 7: VA charakteristiky s odečteným iontovým proudem pro měření s konstantním proudem  $I_v = 40 \text{ mA}$ .

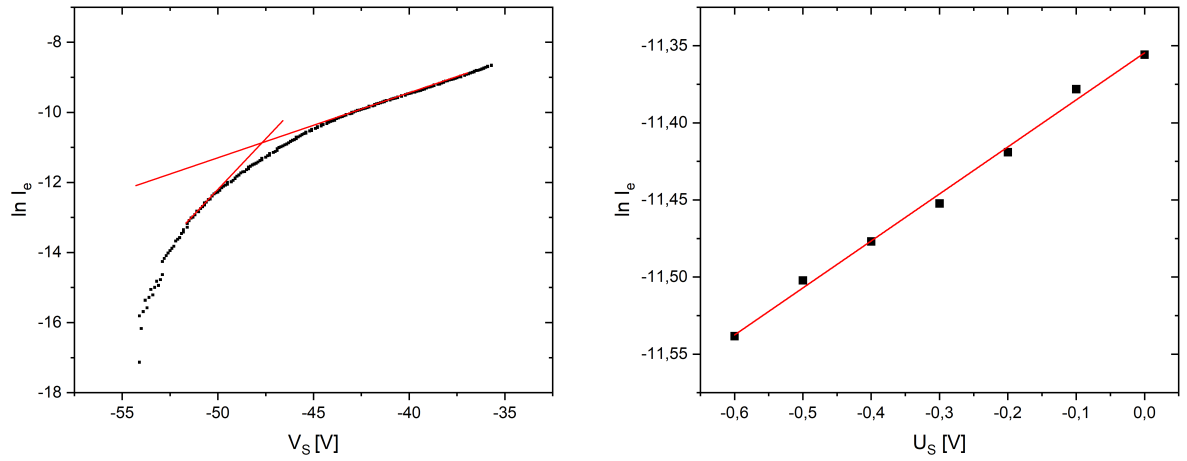


Obrázek 8: Stanovení potenciálu plazmatu a elektronové teploty,  $p = 100$  Pa a  $I_v = 30$  mA.

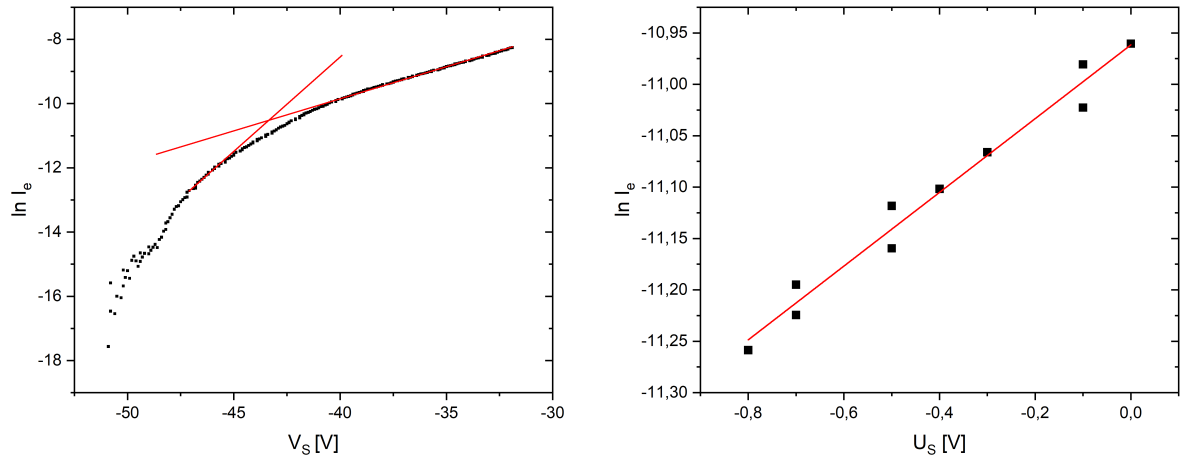


Obrázek 9: Stanovení potenciálu plazmatu a elektronové teploty,  $p = 100$  Pa a  $I_v = 40$  mA.

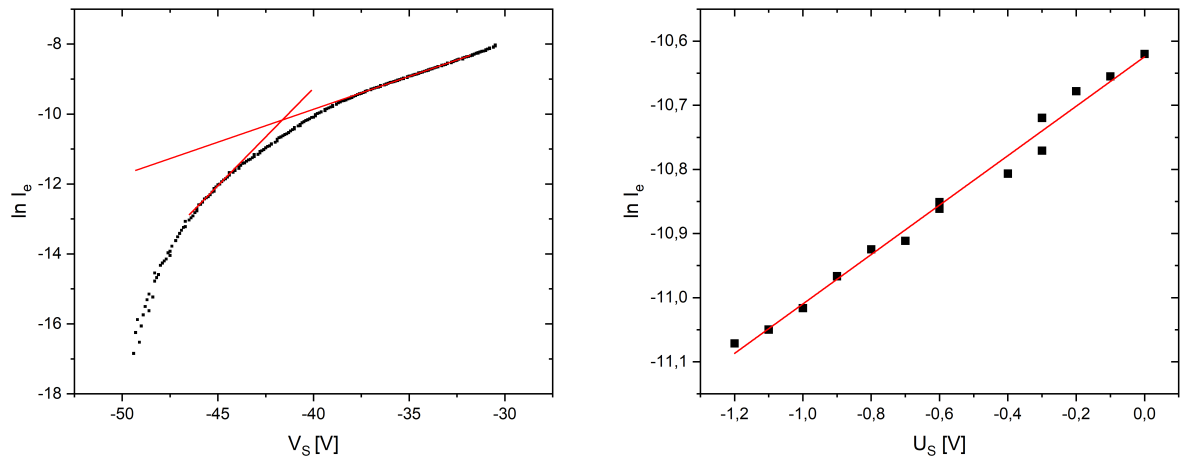


Obrázek 10: Stanovení potenciálu plazmatu a elektronové teploty,  $p = 100$  Pa a  $I_v = 50$  mA.

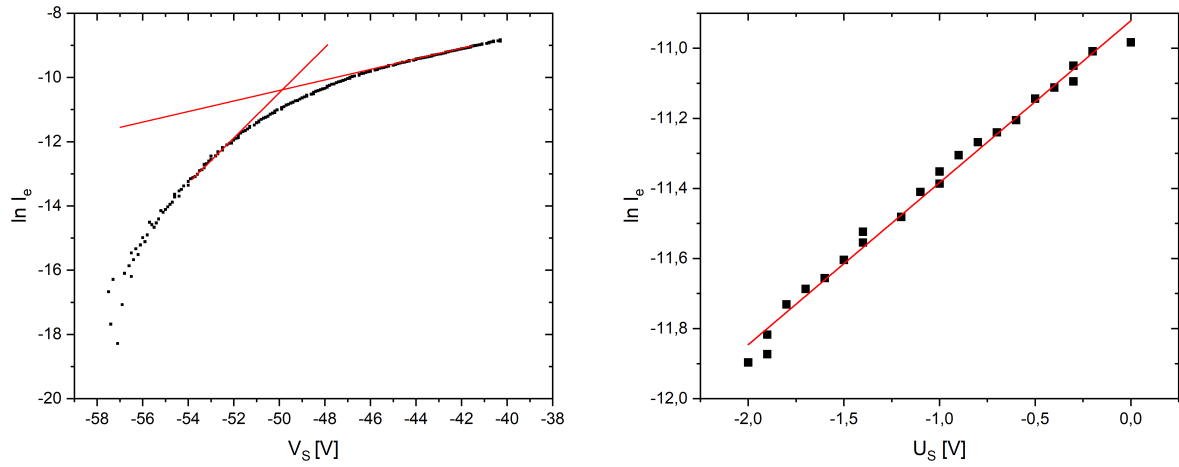


Obrázek 11: Stanovení potenciálu plazmatu a elektronové teploty,  $p = 200$  Pa a  $I_v = 40$  mA.

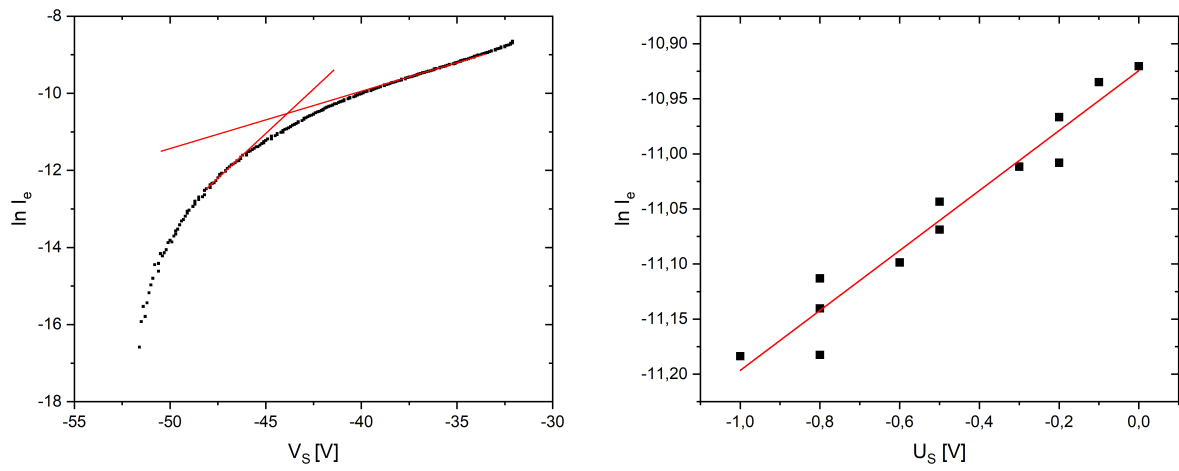


Obrázek 12: Stanovení potenciálu plazmatu a elektronové teploty,  $p = 50$  Pa a  $I_v = 40$  mA.

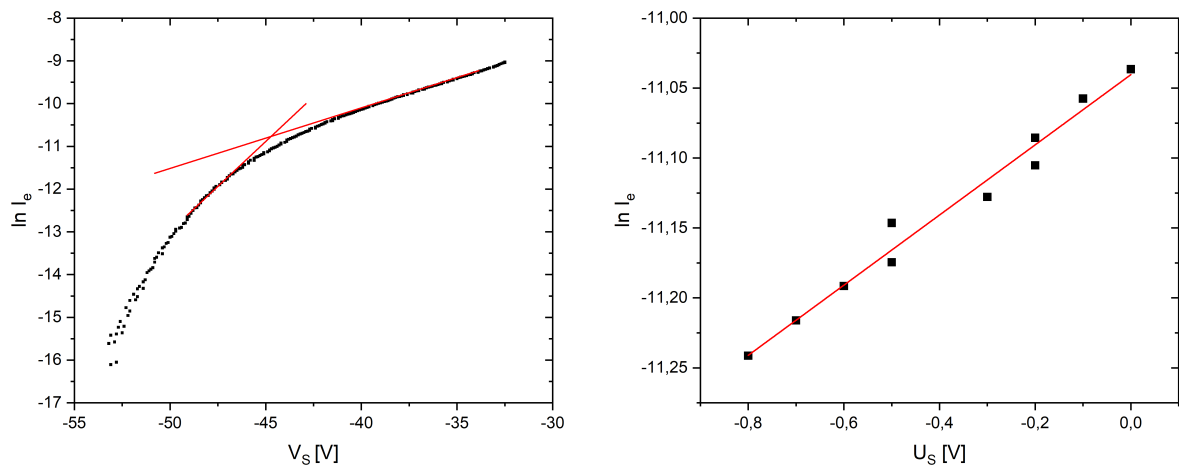

Obrázek 13: Stanovení potenciálu plazmatu a elektronové teploty,  $p = 20$  Pa a  $I_v = 40$  mA.

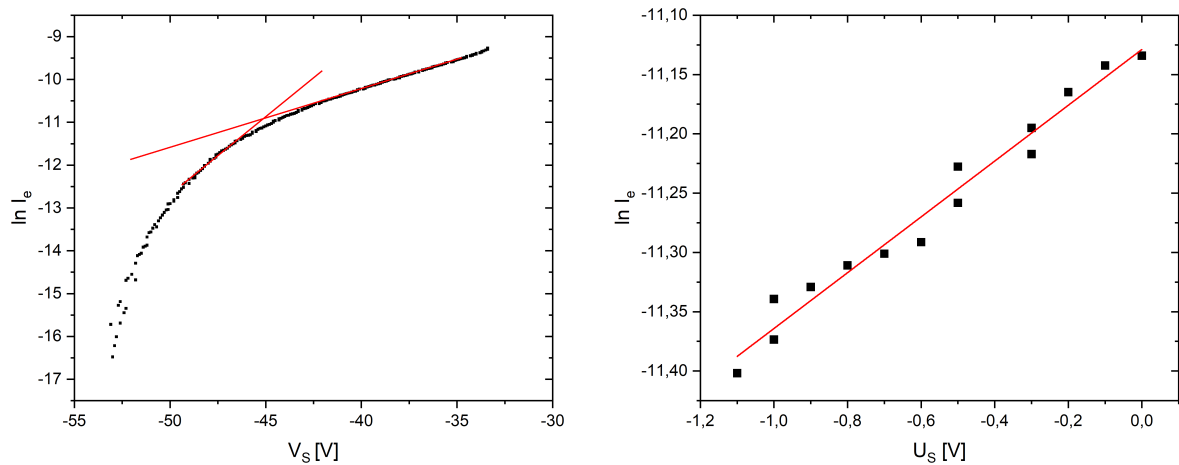

Obrázek 14: Stanovení potenciálu plazmatu a elektronové teploty,  $p = 10$  Pa a  $I_v = 40$  mA.

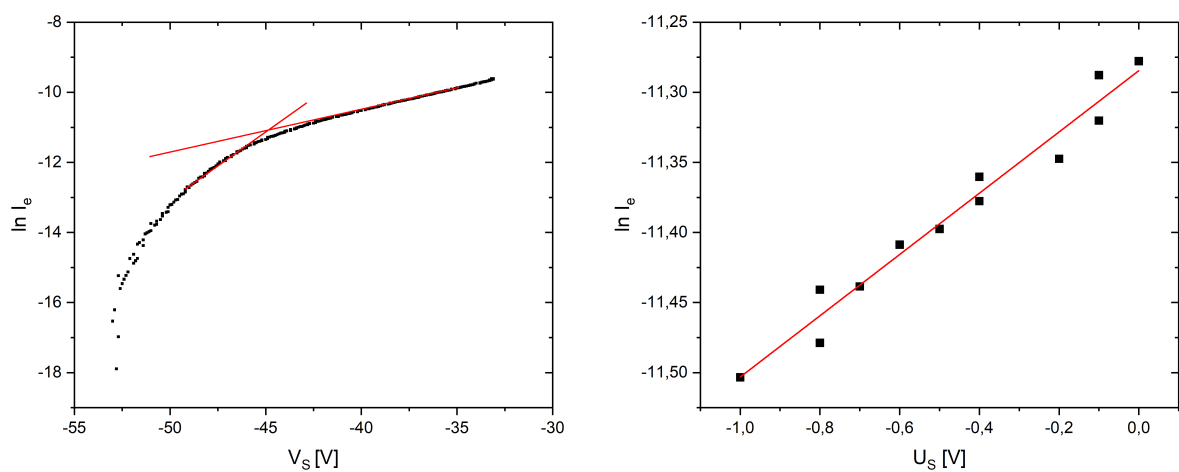

Obrázek 15: Stanovení potenciálu plazmatu a elektronové teploty,  $p = 5$  Pa a  $I_v = 40$  mA.